

# Lève-patient *Samssoft 175*



- Facile d'utilisation
- Compact
- Garanti 5 ans

Chaque jour, nous améliorons votre vie

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

# Samsoft 175

## Facile d'utilisation

**Nouvelle pédale d'écartement :**  
3 fois moins de force nécessaire à l'ouverture<sup>(1)</sup>.



**Ouverture utile 73 cm** (au centre des longerons).  
Permet le ramassage au sol du patient.

**Hauteur réduite** de la base 9cm, facilite l'accès sous tous types de lits.

Roues à double galets, Ø 75 mm. Haut niveau de roulement et solidité.

Bielle réglable

Système avec blocage des longerons pour le transport.

Amplitude de levage max :  
173 cm (avec palonnier 4 points)



Poignée de poussée ergonomique.  
Permet de trouver une position des mains idéale et efficace

<sup>(1)</sup> En comparaison avec la précédente version du SAMSOFT 175.

## Compact



Encombrement minimum associé à une structure légère, pour un lève-patient maniable et sécurisant (largeur hors-tout en position fermée : 63cm)




Aucun démontage nécessaire. Le palonnier s'insère dans le mât à l'aide de la télécommande. Le vérin reste protégé par la structure.  
**Peut se ranger contre un lit, pour un gain de place.**

Structure équilibrée permettant d'être **le rangement à la verticale**, sans démontage et en toute sécurité.

# Samsoft 175

## Alimentation électrique

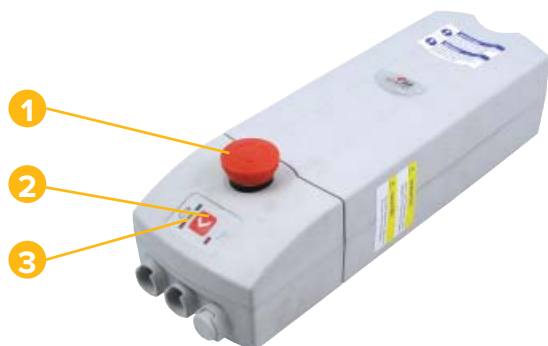

**Recharge de la batterie, 2 possibilités :** sur socle ou directement sur prise secteur.

1. Arrêt d'urgence
2. Descente électrique d'urgence
3. Voyant de fonctionnement

En branchant directement l'appareil à une prise secteur murale grâce au chargeur intégré **ou** à distance en enlevant la batterie pour la connecter seule à une prise secteur murale.

**Batterie bien chargée = durabilité.**

Une fiabilité reconnue : **99% de fiabilité des batteries\***

(\*étude interne service qualité Drive DeVilbiss Healthcare France sur 2015/2016)

## Sécurité

Certifié conforme à la norme ISO 10535 par un **organisme indépendant reconnu** (CERAH).

Palonnier 4 points de série équipé de crochets recourbés anti retour, assurant un accrochage simple et sécurisé.



Garantie 5 ans sur structure, vérin et boîtier de contrôle.

# Samssoft 175

## Options



Système blocage des longons en position ouverte  
Réf. SR 287 0100



Palonnier cintré 2 points  
amplitude de levage de 177 cm  
Réf. SR 285 1200



Peson non Classe III  
Réf. SR 282 0400



Peson Classe III  
Réf. SR 282 0500



Sangles disponibles au catalogue :

- sangle polyester confort,
- filet bain,
- hamac filet bain,
- hamac filet toilette.

Voir notre documentation en ligne directement en scannant ce Flash Code :



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence du <b>Samssoft 175</b>	SR 281 0100
Capacité de levage	175 kg
<b>Hauteur de levage maxi (palonnier 4 points)</b>	<b>173 cm</b>
<b>Hauteur de levage maxi (palonnier 2 points)</b>	<b>177 cm</b>
Largeur hors-tout de la base	63 cm
Longueur hors-tout	134 cm
<b>Hauteur de la base (châssis)</b>	<b>9 cm</b>
Ecartement intérieur des longons	54 à 83 cm
<b>Poids net de l'appareil</b>	<b>38,4 kg</b>

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

S 041 0617 5



Cachet du distributeur

**Drive DeVilbiss Healthcare France**

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie  
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD - FRANCE  
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

